

ma3000

ANESTHESIA MACHINE



MURACO Medical Co., Ltd.

ma3000

ma300

Newly developed by MURACO Medical

ムラコ麻酔器MA-300は、徹底した生産の合理化により
実用性と低価格に重点をおき、新しく設計された麻酔器です。
ミドルタイプながら豊富なオプションのコーディネートにより
高度の現代麻酔に対応した
一層安全な麻酔管理を行うことができます。

■構成

- 流量計 O₂:0.1~10L
N₂O:0.5~10L
- O₂フラッシュバルブ
- 気化器取付けバー
- アブゾーバー
キャニスター容量:1500cm³
気道内圧計:-10~+60cm H₂O
呼吸バッグ部:フリーアーム方式
(ご使用しやすいポジションに止まります)
※ソーダライムの交換は、ワンタッチレバーにより容易に行えます。
- アブゾーバー取付けホルダー
ワンハンドにより任意の高さに調節できます。
調節可能上下動45cm(360°回転可能)
- ガスポンベ搭載 O₂中型ポンベ用(10L) 1
N₂O中型ポンベ用(7.5kg) 1
※オプションによりパイピングホース接続兼用にもなります。
- サイズ 本 本:530mm(W)×550mm(D)×1320mm(H)
モニターシェルフ:480mm(W)×280mm(D)×1320mm(H)
テーブルトップ :480mm(W)×320mm(D)×850mm(H)
下段ショルフ :480mm(W)×320mm(D)×300mm(H)
引出し内寸法 :415mm(W)×285mm(D)×125mm(H)
- 重量 約68kg

■オプション

- エトレン気化器 エンフルウィックTYPE100(容量120mL)
- エトレン気化器 エンフルウィックTYPE200(容量230mL)
- フローセン気化器 ハローウィック(容量120mL)
- 気管内麻酔セット



エンフルウィックTYPE100




エンフルウィックTYPE200



ハローウィック



麻酔用ベンチレーター-Villa

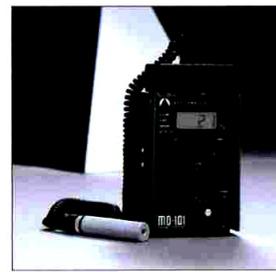

酸素モニター-MO-101
(プレッシャーセンサー-MP-100含む)

安全対策

- フローメーターセーフガードシステム
最低酸素濃度が21%以下にならないように制御する安全機構システムです。
※特にO₂用流量調節ノブは誤操作防止のため、JIS規格に基づいた特殊形を採用しています。
- 酸素圧低下セーフガードシステム
酸素供給圧力が3kg/cm以下になりますと笑気ガスの流れを自動的に停止させ、同時に可聴警報システムが働くシステムです。
※システムが作動しますと、3m離れた位置においても十分可聴の55dB以上の警報音を10秒以上発し続けます。
- 余剰ガス排除装置“SAFTHRU”を装備
この装置を吸引ポンプ等に接続することにより、余剰ガスを室外へ排除させることができます。

■標準付属品

- 減圧弁(O₂・N₂O) 各1
- 耐圧ホース(O₂・N₂O 長さ1m) 各1
- チムニーピース 1
- マスク(大・小) 各1
- 蛇腹管 2
- 呼吸バッグ(5L) 1
- ヘッドバンド(大) 1
- プラスチックエアウェイ(大・中・小) 各1
- ソーダライム(3kg入) 1
- モンキーレンチ 1
- 余剰ガス排出用蛇管(1m) 1

- 麻酔用ベンチレーター-Villa
- 酸素モニター-MO-101
(プレッシャーセンサー-MP-100含む)
- タイコス大型血圧計



株式会社

ムラコ・メディカル

東京都文京区本郷3丁目25番9号 〒113-0033 TEL.03-3814-8477

FAX.03-3816-7838

E-mail:muraco@mub.biglobe.ne.jp