


SEVOFRANE® 専用気化器

SEVOWICK

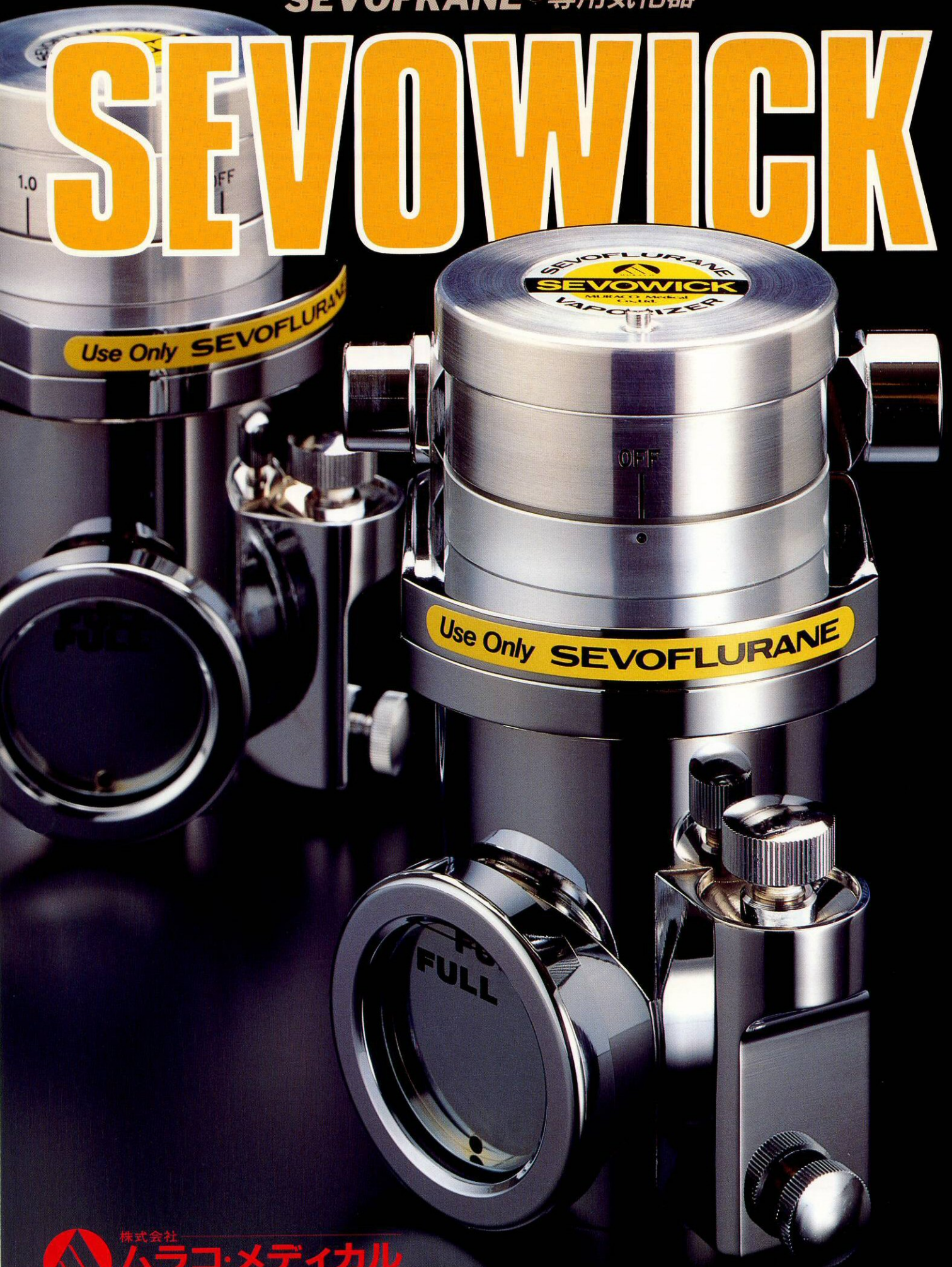

株式会社

ムラコ・メディカル

SEVOWICK

SEVOFLURANE®専用気化器

セボフレン専用気化器《セボウィック》、新登場!

安全性はもとより、優れた耐久性と
正確な機能を発揮するコンパクトタイプです。

また当社では厳しい品質管理のもと

1台1台ガスクロマトグラフにより
キャリブレーションを行っておりますので
安心してご使用いただけます。



- 非常にコンパクトな設計により軽量化に成功、しかもどのような麻醉器にも取付けが容易に出来ます。
- 簡単なダイヤル操作により低流量においても任意のガス濃度が維持できます。
- 連続長時間の使用時においてもガス濃度の変化が無くダイヤルセットの濃度が得られます。
- ガスの圧力の変化に対しても、ほとんど影響されることなく一定のガス濃度が維持されます。

ダイヤルロック方式

ダイヤルOFFの位置ではロックされており、押すことによりロックが解除され任意のガス濃度にセット可能となります。

液注入口及び排液口

正面に設置されていますので、セボフレンの注入・排出も容易にできます。


液面計

大きく見やすい覗き窓になっておりますので液面の観察も容易にできます。


寸 法 (mm)	重量(kg)	容 量 (ml)
120(W)×125(D)×175(H)	4.3	約230(うち、灯芯吸収分約30)

〈付属品〉 ガスIN OUTアダプタ…1組 AL製座板(2種)…2ヶ
ボルト…2本 チュービング(1m)…1本


流量によって気化温度が変化されないように補正されており、低流量から高流量まで安定したガス濃度が維持できます。

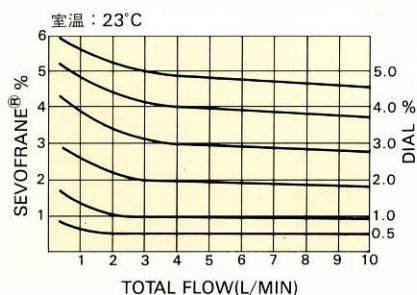

自動温度コントロールにより18℃～26℃以内であれば、下図のように温度変化があっても、ほぼダイヤルセット通りの濃度が得られます。

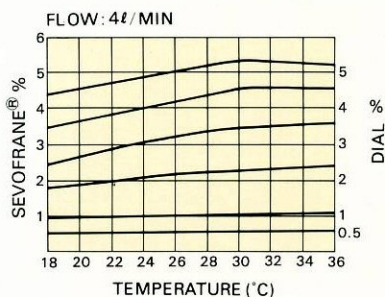

長時間連続に使用してもダイヤルセット通りのガス濃度が得られます。

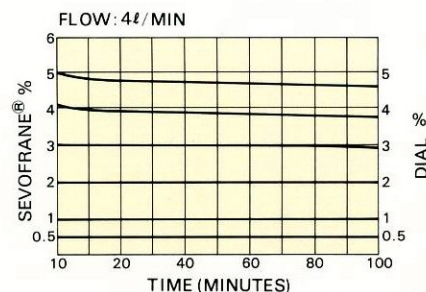

承認番号 (01B) 第1111号



株式会社

ムラコ・メディカル

東京都文京区本郷3丁目25番9号 〒113-0033 TEL.03-3814-8477

FAX.03-3816-7838

E-mail:muraco@mub.biglobe.ne.jp