


Villa

ANESTHESIA VENTILATOR

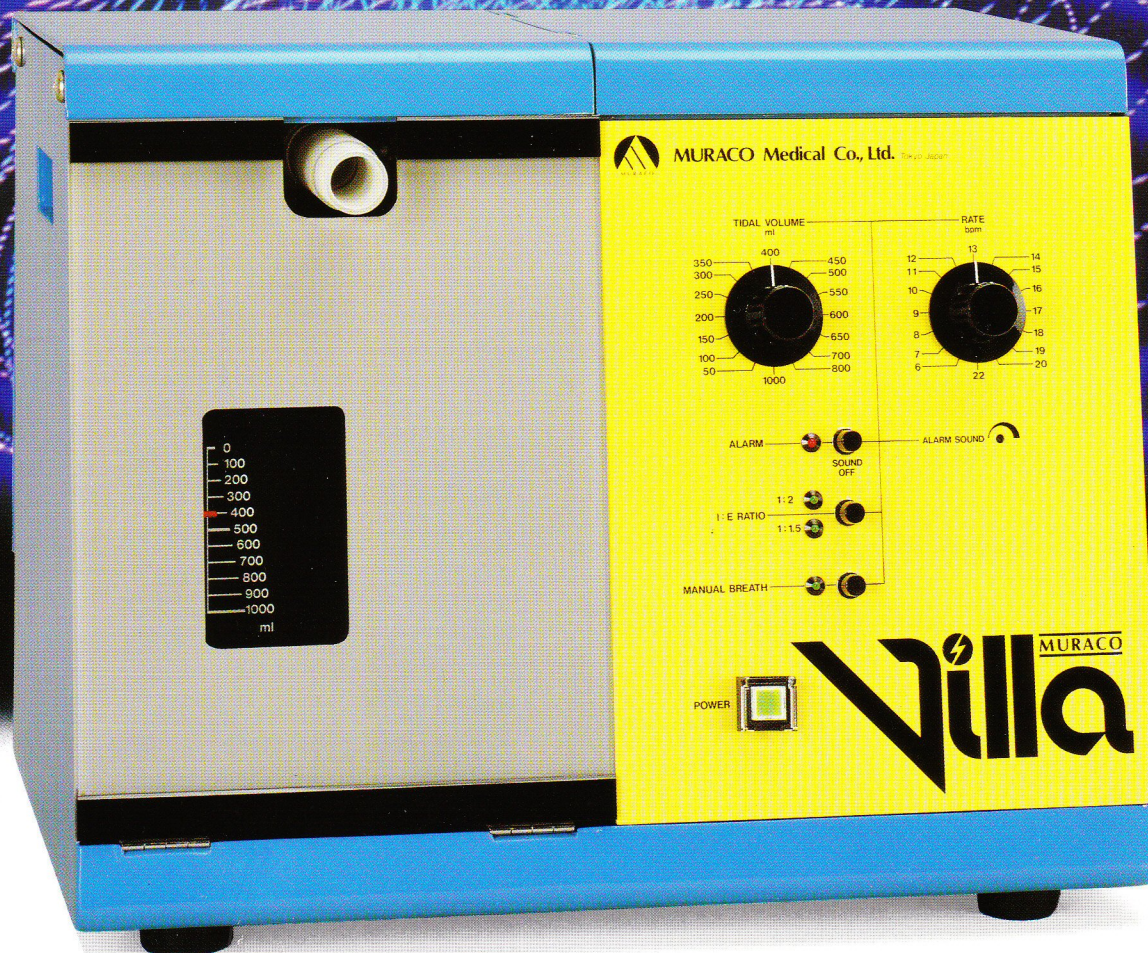


MURACO Medical Co., Ltd.

ANESTHESIA VENTILATOR

MURACO Medical Co., Ltd.

ムラコ麻酔用ベンチレーターVillaは、コンピュータコントロールにより
麻酔時の呼吸管理を、より一層安全で、しかも容易になりました。

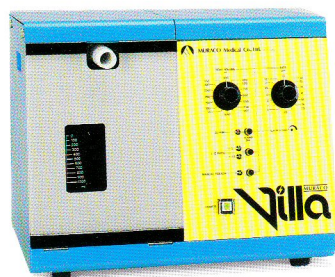

特長

- あらゆる麻酔器にも搭載可能です。
- 小型軽量で、しかも持ち運びも容易です。
- コンピュータ制御により長時間にわたっての安定した呼吸管理を行うことができます。



仕様

適応……………小児及び成人の全身麻酔時の呼吸管理
 方式……………タイムサイクル・ポリウムリミテッド
 駆動方式……………直流サーボモーター・コンピュータ制御
 1回換気量……………50～1000ml
 呼吸回数……………6～22回/分
 呼吸相比……………1:1.5、1:2
 EIP……………呼吸相時間の5%
 過圧安全弁作動圧……………50cmH₂O(可変設定可能)

警報装置

●リークアラーム●

気道内圧が5cmH₂O以下の状態が15秒続いた場合、ブザーと赤ランプで表示。

* サウンドオフ機構：セットにより、ブザーは一時停止され60秒以内に自動復帰します。(ブザー音の高低は調節可能)

●停電アラーム●

電源スイッチONの状態AC電源の供給が断たれた場合、ブザーの発生と同時に電源スイッチのランプが消える。(停電アラーム用ブザーの電源は、スーパーキャパシタ。)

積算通電時間計

後部に取り付けられた積算時間計により、保証に対する使用時間の確認及び定期点検等の目安にもなります。

洗浄及び滅菌

呼吸回路は容易に取り外すことができ、EOG滅菌、ホルマリン消毒も可能です。

電源……………AC100V 50/60Hz
 消費電力……………最大60VA
 サイズ……………385mmW×295mmD×315mmH
 重量……………17kg

標準付属品

テストバッグ……………1	蛇管……………1
リザーバー用バルブ……………1	余剰ガス排除用蛇管……………1

※注意：可燃性の麻酔ガス環境においては使用できません。

製造承認番号(63B)第0681号



株式会社
ムラコ・メディカル
 東京都文京区本郷3丁目25番9号 〒113-0033 TEL.03(3814)8477代
 FAX.03(3816)7838